

# ULTRAHANGOS FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ KÉSZÜLÉK

## A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db ultrahangos fogkő eltávolító készülék

## TERMÉKLEÍRÁS:

- Alapanyag: Élelmiszeripari minőségű szilikon / PC / ABS / 304 rozsdamentes acél fej
- IPX6 vízállósági szabvány
- Töltés a mellékelt USB kábellel
- 5 állítható erősségi fokozat (10000 - 25000 alkalommal percenként)
- Feszültség: 3,7 V
- Névleges áram: 200 mA
- Készenléti áram:  $\leq 20 \mu\text{A}$
- Töltési feszültség: 5 V, 500 mA
- Motor zajszint:  $\leq 60 \text{ dB}$



## HOGYAN HASZNÁLJA:

- Töltse a készüléket legalább 2 órán keresztül az első használat előtt.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához
- Használja a „fel” vagy „le” nyilakat az 5 különböző teljesítménymód közötti váltáshoz
- Kezdje el tisztítani a fogait ott, ahol szükséges.
- A tükörbe nézve tegye a fém fejet a kezelendő területre. Enyhén nyomja rá a plakk vagy fogkő eltávolításához.
- A készülék 30 másodpercenként 1 másodperc szünetet tart, 3 perc után pedig automatikusan lekapcsol. Gargalizáljon vízzel, és tisztítsa meg a készüléket. Igény szerint ismétlje az előző lépéseket.

## TÖLTÉS:

- A töltési módba lépéskor a fogtisztító zárt pozícióba áll át. Ekkor a készülék működése leáll.
- Töltés közben az alsó lámpa pirosan világít. Amikor az eszköz feltöltött, a zöld lámpa gyullad ki.




## MEGJEGYZÉSEK:

- A készülék fogtisztításra használatos, mely nem helyettesíti a fogak kezelésére és helyreállítására alkalmazott orvosi eszközöket.
- A készülék használata közbeni enyhe fogínyvérzés normális jelenség.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

## FIGYELEM:

- A fogtisztító fém feje nem cserélhető
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Tárolja beltéren. Tárolja  $-10\text{ °C} - 40\text{ °C}$  közötti hőmérsékleten.
- Ne mossa vagy áztassa a terméket hosszú ideig.
- A terméket kizárólag felnőttek használhatják. Használat után a terméket megfelelő helyen és a gyermekektől elzárva tartsa, így a gyermekek véletlenül sem sérülhetnek meg.
- A termék akkukat tartalmaz. Ne tegye a terméket tűzbe vagy magas hőmérsékletű helyre a robbanás elkerülése érdekében.
- A termékminőséggel kapcsolatos problémák esetén, kérjük, ne szerelje szét. Javítás céljából kérjük, juttassa vissza az eredeti üzemhez.

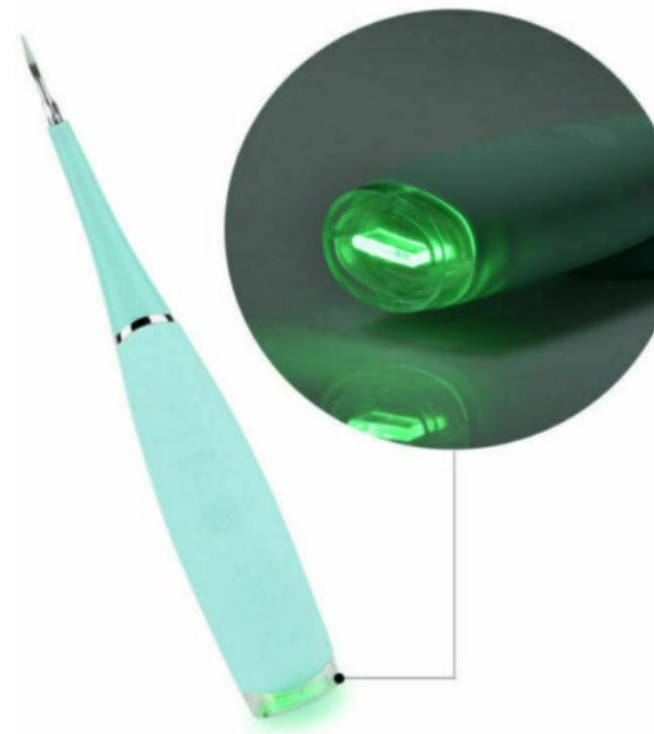

## JÓTÁLLÁS:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésre (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.