

ABLATORE DENTALE AD ULTRASUONI

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 ablatore dentale ad ultrasuoni

SPECIFICHE:

- Materiale: Silicone alimentare / PC / ABS / testina in acciaio inossidabile 304
- Standard impermeabile IPX6
- Ricarica con il cavo USB incluso
- 5 livelli regolabili di intensità (10000 - 25000 volte al minuto)
- Tensione: 3,7 V
- Corrente nominale: 200 mA
- Corrente in standby: ≤ 20 μ A
- Tensione di ricarica: 5 V, 500 mA
- Rumorosità del motore: ≤ 60 dB



ISTRUZIONI PER L'USO:

- Caricare il dispositivo per almeno 2 ore prima di usarlo per la prima volta.
- Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo
- Usare la freccia "su" o "giù" per scegliere tra 5 diversi livelli di potenza.
- Iniziare a pulire i denti dove necessario.
- Guardando in uno specchio, applicare la testina metallica alla parte da trattare. Fare una leggera pressione per rimuovere la placca dentale o il tartaro.
- Il dispositivo fa una pausa di 1 secondo ogni 30 secondi e si spegne automaticamente dopo 3 minuti. Effettuare dei gargarismi con acqua e pulire il dispositivo. Ripetere i passi precedenti a seconda delle necessità.

RICARICA:

- Dopo essere entrato nella modalità di ricarica, l'ablatore dentale inizia lo spegnimento. A questo punto l'apparecchio smette di funzionare.
- Durante la ricarica, la luce inferiore è rossa. Quando il dispositivo è carico, si accende la luce verde.




NOTE:

- Il dispositivo si usa per pulire i denti, non può sostituire gli strumenti medici per trattare o restaurare i denti.
- Un leggero sanguinamento delle gengive quando si usa il dispositivo è un fenomeno normale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE:

- La testina metallica dell' ablatore dentale non è sostituibile.
- Non posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Conservare in un luogo chiuso. Conservare a temperatura da -10 °C a 40 °C.
- Non lavare o immergere il prodotto per molto tempo.
- Il prodotto è destinato solo agli adulti. Custodire adeguatamente il prodotto dopo l'uso, tenerlo fuori dalla portata dei bambini, per evitare che i bambini si feriscano per errore.
- Il prodotto contiene batterie. Non collocare il prodotto sul fuoco o in un contenitore ad alta temperatura per evitare incendi o esplosioni.
- Se ci fossero problemi con la qualità del prodotto. Si prega di non smontarlo. Si prega di restituire al produttore originale per la riparazione

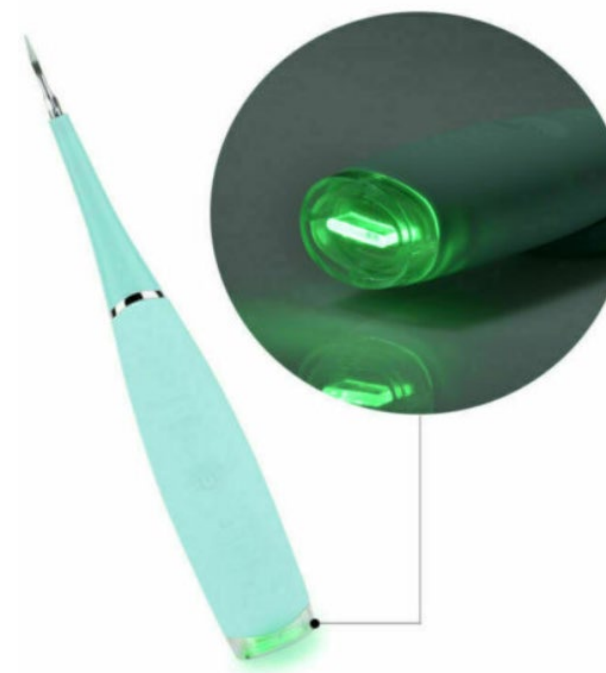

GARANZIA:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".